

De feiten over



Zijlijnen

Toepassing

Voor continue toediening is het mogelijk met een zij-infuus op het Y-aansluitpunt boven de druppelkamer een tweede infuuszak aan te sluiten. Het zij-infuus is ook een veel gebruikte methode voor het toedienen van medicatie.

Productinformatie

- beluchte spike
- afsluitklem
- lengte: 40cm
- afsluitdop met hydrofoob filter

Er zijn 2 typen uiteinden:

- Een RVS-naald om de zijlijn aan te sluiten op een infuussysteem met een latexvrij aanprikpunt
- Een Luer-lock uiteinde om de zijlijn aan te sluiten op een infuussysteem met Luer-lock aansluitpunt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
TTMN0025	TTMN ZIJLIJN STERIEL REF 95006	4 st.	5 x 4 st.
5			



Verlenglijnen

Toepassing

Een verlengslijn (ook wel spuitpompslijn genoemd) wordt gebruikt om een standaard infuussysteem te verlengen of om een verbinding te maken tussen de infusievloeistof in een spuit en de infuusnaald in het bloedvat van de patiënt.

Naast standaard verlenglijnen heeft Medeco ook een verlengslijn speciaal voor lichtgevoelige medicatie. Tevens biedt Medeco gekleurde lijnen. Handig om de verschillende spuitpompen bij een IC-bed uit elkaar te houden.

Productinformatie

- gemaakt van PVC of PE
- luer-lock aansluitingen
- female/male

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
TTMN0130	TTMN VERLENGLIJN 150CM MALE/MALE STERIEL PE REF 95010	4 st.	40 x 4 st.
TTMN0145	TTMN VERLENGLIJN 25CM FEMALE/MALE STERIEL PVC DEHP VRIJ	4 st.	10 x 4 st.
0	REF 95027		

De feiten over



Afsluitdopjes

Toepassing

Een afsluitdopje dient voor het steriel afsluiten van een infuuscanule, grippernaald, niet gebruikte deel van een driewegkraan, infuussysteem, enz.



Productinformatie

- Combi-lock: past zowel op male als op female uiteinden


- Male Luer-lock met aanprikmembraan: Past alleen op een female uiteinde.

Door het membraan kan er met een naald vloeistof geïnjecteerd of geaspireerd worden.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
682810	AFSLUITDOPJE COMBI-LOCK FEMALE/MALE WIT STERIEL REF 165280	250 st.	16 x 250 st.
TTMN0230 0	TTMN AFSLUITDOP MALE MET LATEXVRIJ AANPRIKPOORT STERIEL REF 95023	10 st.	40 x 10 st.
TTMN0235 0	TTMN AFSLUITDOP COMBI-LOCK FEMALE/MALE LUER-LOCK STERIEL REF 95022	10 st.	200 x 10 st.
95022	JECTON AFSLUITDOP COMBI-LOCK FEMALE/MALE LUER-LOCK STERIEL	200 st.	30 x 200 st.

De feiten over

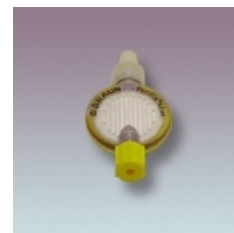

Bacteriefilters

Toepassing

Een bacteriefilter wordt gebruikt om een infuusvloeistof, bacterie, schimmel en endotoxine-vrij te maken.

Productinformatie

- gekoppeld tussen een infuscanule, grippernaald of catheter en een infuussysteem
- heeft twee luer-lock aansluitpunten
- vervangen met iedere wisseling van het infuussysteem

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
TTMN0250 0	TTMN BACTERIEFILTER 0.2 MICRON STERIEL REF 95021	3 st.	25 x 3 st.

De feiten over



Driewegkranen en kranenblokken

Toepassing

Een driewegkraan is een kunststof verbindingstuk met twee female en één male Luer-lock aansluitingen. Er is ook een driewegkraan met een lijn van 10cm dat eindigt in een male Luer-lock verbinding.



Productinformatie

- kleuren: rood & blauw
- lipid resistant
- lijn: PVC DEHP vrij
- meervoudig kranenblok

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
TTMN0160	TTMN DRIEWEGKRAAN ROOD STERIEL REF 95017	3 st.	100 x 3 st.
ØTTMN0170	TTMN DRIEWEGKRAAN BLAUW MET 10CM LIJN STERIEL REF 95019	4 st.	50 x 4 st.
95019	JECTON DRIEWEGKRAAN MET 10CM SLANG. PVC DEHP VRIJ STERIEL	100 st.	4 x 100 st.
95017	JECTON DRIEWEGKRAAN ROOD STERIEL LIPID RESISTANT	50 st.	10 x 50 st.
95018	JECTON DRIEWEGKRAAN BLAUW STERIEL LIPID RESISTANT	50 st.	10 x 50 st.



Fixatiemateriaal

Toepassing

Het "Statlock" PICC plus fixatiesysteem is speciaal ontwikkeld voor het fixeren van een PICC lijn. (perifeer ingebrachte centraal veneuze catheter. Het kan langer aangebracht blijven en verminderen complicaties. Het systeem is eenvoudig aan te brengen.

Productinformatie

- * Vermindert het infectierisico.
- * Zorgt ervoor dat de catheter langer kan blijven zitten
- * Alle connecties blijven goed zichtbaar.
- * Verhoogt het comfort van de patiënt.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
TTMN0271 0	TTMN FIXATIEPLEISTER STATLOCK PICC PLUS STERIEL REF 15279065	2 st.	25 x 2 st.

De feiten over



Snelheidsregelaar

Toepassing

Dit koppelstuk met druppelregelaar regelt de loopsnelheid van het infuussysteem in ml/per uur. Het borgt een hogere nauwkeurigheid dan een standaard zwaartekrachtstelsel en garandeert de juiste snelheid.

Productinformatie

- eenmaal ingesteld blijft de snelheid gedurende de gehele infuusperiode constant
- toepasbaar in combinatie met de meeste infuusvloeistoffen
- snel en eenvoudig aan te koppelen en in te stellen
- female/male
- instelbaar van 0 ml tot 250 ml per uur
- NIET geschikt voor bloed

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
TTMN0267 0-1	TTMN SNELHEIDSREGELAAR MET 50CM SLANG. PVC DEHP VRIJ STERIEL REF 95025	2 st.	10 x 2 st.
95025	JECTON SNELHEIDSREGELAAR MET 50CM SLANG. PVC DEHP VRIJ STERIEL	100 st.	4 x 100 st.

De feiten over




Verbindingsstukjes

Toepassing

Een verbindingsstukje dient om twee uiteinden met elkaar te verbinden.

Productinformatie

- female/conisch voor een verbinding tussen een voedingsmaagsonde en een male uiteinde
- female/female voor een verbinding tussen twee male uiteinden
- Steriel

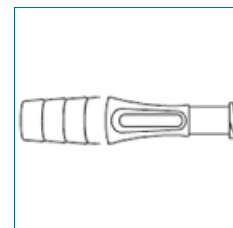

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
TTMN0237 0	TTMN CONNECTOR FEMALE/FEMALE AANSLUITING STERIEL REF 89200	5 st.	60 x 5 st.
TTMN0237 5	TTMN CONNECTOR FEMALE/CONISCH (VOOR VOEDINGSSONDE) STERIEL REF 80100	3 st.	100 x 3 st.