



Wondretractor

Toepassing

Bij laparotomieën wordt de Disarp gebruikt om een goed en duidelijk zicht in het operatiegebied te krijgen en te behouden. Dit gebeurt enerzijds door de darmen opzij te houden, anderzijds doordat de Disarp bloed uit het operatiegebied absorbeert.

Productinformatie

- de Disarp bevat flexibel, chirurgisch staal waardoor het in iedere gewenste vorm gebogen kan worden, afhankelijk van de soort operatie
- beschadigt tere weefsels, zoals de darmen, niet
- neemt van de assisterende de taken over zodat deze andere handelingen kan uitvoeren
- goed absorptievermogen vermindert het gebruik van OK-gazen
- de Disarp kan uitgewrongen en opnieuw geplaatst worden
- x-ray detectable
- wanneer de Disarp voor gebruik bevochtigd wordt met een fysiologische zoutoplossing, wordt de Disarp antistatisch
- disposable, waardoor de kans op kruisinfecties verkleind wordt
- 450 mm lengte met een absorberend vermogen van ongeveer 200 ml
- 250 mm met een absorberend vermogen van ongeveer 100 ml
- dubbel steriel verpakt
- gesteriliseerd dmv ethyleen-oxide

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
671709	DISARP COMPRES 25 X 5 X 5 CM STERIEL	25 st.	1 x 25 st.
671809	DISARP COMPRES 45 X 5 X 5 CM STERIEL	25 st.	1 x 25 st.


De feiten over



Gelitaspon gelatineproducten

Toepassing

Gelitaspon kan gebruikt worden bij de meeste chirurgische ingrepen en in het bijzonder daar waar veneuze of diffuse bloedingen optreden, die moeilijk met traditionele middelen onder controle kunnen worden gebracht. Het gunstige haemostatische effect is te danken aan de gelijkmatige poreusheid van de spons, waardoor de bloedplaatjes zich aan het netwerk hechten en afgebroken worden, waarbij trombokinase vrijkomt.

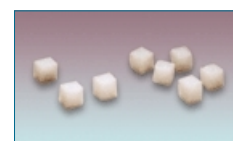

Productinformatie

- haemostatische werking
- leverbaar in 2 dikten: standaard (10 mm dik), speciaal (1 mm dik),
- steriel

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9490001-1	CURASPON GELITASPON STANDARD STERIEL 80 X 50 X 10 MM	2 st.	36 x 2 st.
9490004-1	CURASPON GELITASPON SPECIAL STERIEL 80 X 50 X 1 MM	20 st.	12 x 20 st.
9490009-1	CURASPON GELITASPON STANDARD STERIEL 80 X 50 X 10 MM	10 st.	12 x 10 st.



Gelitaspon dentaal kubes

Toepassing

Gelitaspon kan gebruikt worden bij de meeste chirurgische ingrepen en in het bijzonder daar waar veneuze of diffuse bloedingen optreden, die moeilijk met traditionele middelen onder controle kunnen worden gebracht. Het gunstige haemostatische effect is te danken aan de gelijkmatige poreusheid van de spons, waardoor de bloedplaatjes zich aan het netwerk hechten en afgebroken worden, waarbij trombokinase vrijkomt.

Productinformatie

- haemostatische werking
- absorbeert geheel zonder enig residu achter te laten

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9490007-1	CURASPON GELITASPON DENTAL STERIEL 10 X 10 X 10 MM	60 st.	30 x 60 st.
9490008-1	CURASPON GELITASPON DENTAL STERIEL 10 X 10 X 10 MM	50 st.	12 x 50 st.



Gelitaspon anaaltampon

Toepassing

Gelitaspon kan gebruikt worden bij de meeste chirurgische ingrepen en in het bijzonder daar waar veneuze of diffuse bloedingen optreden, die moeilijk met traditionele middelen onder controle kunnen worden gebracht. Het gunstige haemostatische effect is te danken aan de gelijkmatige poreusheid van de spons, waardoor de bloedplaatjes zich aan het netwerk hechten en afgebroken worden, waarbij trombokinase vrijkomt.

Productinformatie

- steriel

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9490005-1	CURASPON GELITASPON ANAAL TAMPON STERIEL 80 X Ø 30 MM	5 st.	12 x 5 st.

De feiten over




HandyVac autoloog bloedtransfusiesysteem

Toepassing

Postoperatief afvoeren en teruggeven van het eigen bloed aan de patiënt.

Productinformatie


- laagvacuüm wonddrainage systeem
- retransfusiesysteem met uniek 150/50/10 micron filter
- luer lock en spike aansluiting
- spiraaldrain
- gesloten systeem
- eenvoudig in gebruik
- wonddrainage en transfusiesysteem apart verpakt, dus kosten besparend

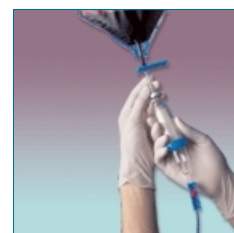

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
665053	UNOMEDICAL HANDY-VAC ATS MET 2 SPIRAL DRAINS. Y-CONNECTOR. BLOEDZAK STERIEL CH10 LUER LOCK	20 st.	1 x 20 st.
665410	UNOMEDICAL DRAINAGEZAK MET AFTAPKRAAN 700 ML STERIEL PER 10	100 st.	2 x 100 st.
665410K	UNOMEDICAL DRAINAGEZAK MET AFTAPKRAAN 700 ML STERIEL PER 100	10 st.	1 x 10 st.


De feiten over

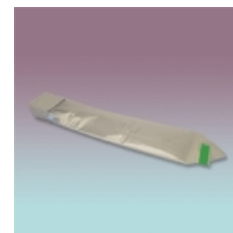

Camerahoës

Toepassing

Garandeert de steriliteit binnen het operatiegebied doordat voorkomen wordt dat de onsteriele kabel in contact komt met het steriele operatiegebied. Tevens biedt de hoës bescherming voor de camera en kabel tegen bloed en wondvocht.

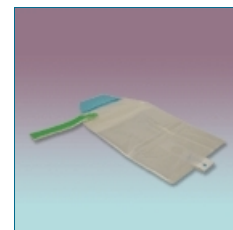


Productinformatie

- verschillende modellen verkrijgbaar
- latexvrij
- steriel

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9138102	DRAPEX CAMERAHOES EASY STERIEL	40 st.	4 x 40 st.
9138103	DRAPEX CAMERAHOES EXCEL STERIEL	40 st.	4 x 40 st.

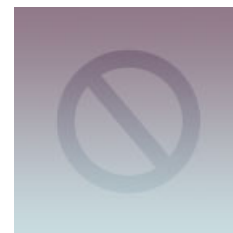

Resoclear anti-condensdoekje

Toepassing


Ter voorkoming van condens op de optische instrumenten bij minimaal invasieve chirurgie, kijkoperaties.

Productinformatie

- steriel, vochtig doekje
- tast de optiek niet aan

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9138000	RESO CLEAR CLEANING DOEKJES 100	24 st.	104 x 24 st.

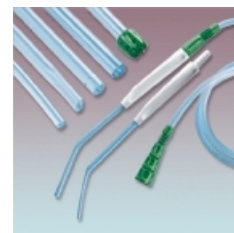

Zuigbuis

Toepassing

Middels zuigbuizen per-operatief opzuigen van bloed, secreet en andere vloeistoffen. Door de verschillende soorten zuigbuizen die leverbaar zijn, kan men bij iedere ingreep precies en doelgericht het operatiegebied goed zichtbaar houden.


Productinformatie

- duidelijk zicht op de opgezogen vloeistof door de stevige, transparante zuigbuis
- handvat met en zonder vacuüm control
- uitgebreid assortiment

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
671386	UNOMEDICAL OP-FLEX ZUIGBUIS POOLE MET X-RAY STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 17.5CM	25 st.	8 x 25 st.
671388	UNOMEDICAL OP-FLEX ZUIGBUIS YANKAUER TAPS TOELOPEND MET VACUUMCONTROL STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 15.5CM	50 st.	6 x 50 st.
671390	UNOMEDICAL OP-FLEX ZUIGBUIS SUMP YANKAUER MET VACUUMCONTROL STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 15.5CM	300 st.	1 x 300 st.
671394	UNOMEDICAL OP-FLEX ZUIGBUIS YANKAUER MET DISTAAL 4 OPENINGEN INCLUSIEF VACUUM CONTROL STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 15.5CM	50 st.	6 x 50 st.
671395	UNOMEDICAL OP-FLEX ZUIGBUIS YANKAUER MET DISTAAL 4 OPENINGEN STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 15.5CM	50 st.	6 x 50 st.
671485	TYPE POOLE ZUIGSET 210 CM 4 DISTALE OPENINGEN 34022182	50 st.	1 x 50 st.
671504-1	UNOMEDICAL OP-FLEX FILTERFLOW ZUIGBUIS STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 15CM	20 st.	2 x 20 st.
672009	YANKAUER ZUIGBUIS STANDARD MET DISTAAL 4 OPENINGEN STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 22CM	50 st.	6 x 50 st.
673309	YANKAUER ZUIGBUIS STANDARD TAPS TOELOPEND STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 22CM	50 st.	6 x 50 st.
673409	YANKAUER ZUIGBUIS STANDARD MET OVALE TIP STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 22CM	50 st.	6 x 50 st.


De feiten over

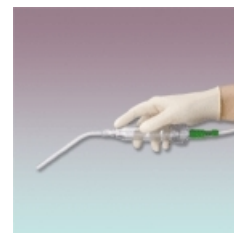

Zuigset

Toepassing

Een compleet systeem van zuigbuis en slang om per-operatief bloed, secreet en andere vloeistoffen af te zuigen.

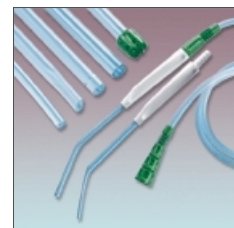

Productinformatie

uitvoering: Unomedical- observatie van de opgezogen vloeistof mogelijk door de stevige, transparante handvat en zuigslang

- flexibele slang met anti-knik verbinding
- handvat met en zonder vacuum control
- vele verschillende zuigbuizen leverbaar

uitvoering: OP-flex zuigsets- ergonomisch ontworpen handvat voor makkelijke manipulatie

- anti-knik systeem direct achter het handvat voorkomt verstopping van de zuigbuis

- “klik-systeem”verbinding voor veilige en betrouwbare verbinding


- cut-to-fit aansluiting past op alle zuigpotten tussen 8 - 18 mm

- flexibele zuigslang is makkelijk te hanteren
- uniforme flow zorgt voor minimaal geluid tijdens gebruik
- vele verschillende handvaten leverbaar
- handvat met en zonder vacuum control
- handvaten zijn verwisselbaar voor een optimale en precieze afzuiging

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
670409	UNOMEDICAL YANKAUER ZUIGBUIS STANDAARD TAPS TOELOPEND INCLUSIEF ZUIGSLANG 210CM STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 22CM	50 st.	1 x 50 st.
671486	UNOMEDICAL OP-FLEX POOLE ZUIGBUIS MET X-RAY INCLUSIEF ZUIGSLANG 350CM STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 17.5CM	50 st.	1 x 50 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
671488	UNOMEDICAL OP-FLEX YANKAUER ZUIGBUIS TAPS TOELOPEND MET VACUUMCONTROL INCLUSIEF ZUIGSLANG 350CM STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 15.5CM	50 st.	1 x 50 st.
671495	UNOMEDICAL OP-FLEX YANKAUER ZUIGBUIS MET DISTAAL 4 OPENINGEN INCLUSIEF ZUIGSLANG 350CM STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 15.5CM	50 st.	1 x 50 st.
671501	UNOMEDICAL OP-FLEX YANKAUER ZUIGBUIS TAPS TOELOPEND MET VACUUMCONTROL INCLUSIEF ZUIGSLANG 210CM STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 15.5CM	50 st.	1 x 50 st.
671502	UNOMEDICAL OP-FLEX FILTERFLOW ZUIGBUIS MET OPVANGSYSTEEM OM VERSTOPPING TE VOORKOMEN INCLUSIEF ZUIGSLANG 250CM STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 23CM	30 st.	1 x 30 st.
673200	UNOMEDICAL OP-FLEX RECTOSCOPIE ZUIGSET MET EEN RECHTE ZUIGBUIS INCLUSIEF ZUIGSLANG 210CM STERIEL LENGTE ZUIGBUIS 47CM	50 st.	1 x 50 st.

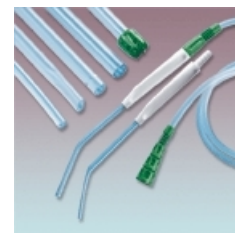

Zuigslang

Toepassing

De verbindingsslang verbindt de zuigbuis met de opvangpot, waardoor vloeistoffen peroperatief worden afgezogen.

Productinformatie

- de zuigslang blijft bij een vacuum van 400 mmHg open
- dubbel steriel verpakt
- gesteriliseerd door ethyleen-oxide
- materiaal Op-flex, slang en connector: polyvinylchloride

verbindingen:- funnel: te gebruiken bij produkten met een male connector


- 1 fingertip - 1 funnel: te gebruiken met funnel zuigcatheters

Op-flex:- “klik”-verbinding : voor veilige en betrouwbare verbinding met de zuigbuis

- “cut-to-fit” funnel: past op alle zuigpotten met connectors van 8 - 18 mm

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
670808	UNOMEDICAL VERBINDINGSSLANG STANDAARD ROOD STERIEL CH24 LENGTE 400CM 1 FUNNEL / 1 CARIFLEX	40 st.	1 x 40 st.
671309	UNOMEDICAL VERBINDINGSSLANG STANDAARD ROOD STERIEL CH30 LENGTE 210CM 2 FUNNELS	50 st.	1 x 50 st.
671410	UNOMEDICAL VERBINDINGSSLANG STANDAARD ROOD STERIEL CH24 LENGTE 300CM 2 FEMALE CONNECTORS	50 st.	1 x 50 st.
671509	UNOMEDICAL VERBINDINGSSLANG STANDAARD ROOD STERIEL CH25 LENGTE 500CM 2 FUNNELS	40 st.	1 x 40 st.
671609	UNOMEDICAL VERBINDINGSSLANG STANDAARD ROOD STERIEL CH24 LENGTE 210CM 1 FINGERTIP / 1 FUNNEL	50 st.	1 x 50 st.
671909	UNOMEDICAL VERBINDINGSSLANG STANDARD ROOD STERIEL CH30 LENGTE 210CM 1 FINGERTIP / 1 FUNNEL	50 st.	1 x 50 st.

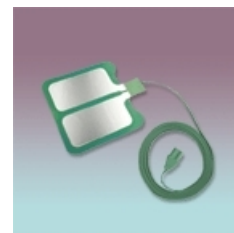

Diathermieplaat disposable

Toepassing

Wordt toegepast bij electrochirurgie voor de geleiding van de stroom terug naar het electrochirurgie apparaat.

Productinformatie

- zowel voor een volwassene als een kind te gebruiken
- over het gehele lichaam te bevestigen
- huid vriendelijke hydrogel
- water bestendige top laag (foam)
- lage impedantie aluminium folie
- beschikbaar in diverse diameter en uitvoeringen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
842707	NEUTRALECT MINI DIATHERMIE PLAAT 2406M	50 st.	6 x 50 st.

De feiten over



Handbrush droog en steriel

Toepassing

Bij het reinigen van de handen op de OK speelt de borstel voor het reinigen van nagels en knokkels een essentiële rol. Het is belangrijk, dat er gebruik gemaakt wordt van een zachte maar effectieve borstel, die beschadiging van de huid voorkomt.


Productinformatie

- per stuk verpakt
- duidelijke gebruiksinstructie op de verpakking
- zachte stevige haren
- ligt goed in de hand
- dispenserdoos met 30 brushes
- RVS dispenserhouder (4810)
- afmeting verpakking 58 x 15 x 13 cm
- steriel

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4800	KLINION PERSONAL CARE HANDBORSTEL DROOG STERIEL	30 st.	10 x 30 st.

De feiten over

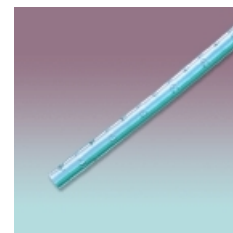

Drain

Toepassing

Per-operatief draineren van wondvocht. Om het genezingsproces te bevorderen en de kans op infecties te verkleinen.

Productinformatie

- a-traumatisch
- latex vrij
- verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, zoals ulmerdrain, redondrain en spiraaldrain
- verkrijgbare maten: CH 08 - CH 18
- verschillende afmetingen van drain en perforatie verkrijgbaar

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
665510	UNOMEDICAL DRAIN MET SPIRAALVORMIGE PERFORATIES STERIEL CH24	20 st.	4 x 20 st.



HandyVac laag vacuüm wonddrainage systemen

Toepassing

Post-operatief afvoeren van wondvocht om infecties te voorkomen en het genezingsproces te bevorderen. Wonddrainage vindt plaats door laag vacuüm waardoor minder kans bestaat op weefselbeschadiging. De balg zorgt voor een optimale drainage zonder weefsel in de drain te zuigen. Hierdoor ontstaat minder trauma aan het weefsel tijdens de drainage en verwijderen van de drain

Productinformatie

- HandyVac heeft een capaciteit van 825 ml, 125 ml in de balg en 700 ml in de opvangzak
- HandyVac initieert een vacuüm van 65 mmHg, wanneer de balg compleet ingedrukt is. Naarmate de capaciteit verhoogt, neemt het vacuüm af en gaat automatisch over in passieve drainage
- makkelijk in te stellen vacuüm en eenvoudig te legen systeem
- vacuüm is duidelijk zichtbaar
- 100% gesloten systeem

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
665000	UNOMEDICAL HANDY-VAC HEUPTAS	1 st.	100 x 1 st.
665020	UNOMEDICAL HANDY-VAC MET DRAIN EN OPVANGZAK STERIEL CH12	20 st.	1 x 20 st.
665030	UNOMEDICAL HANDY-VAC MET DRAIN EN OPVANGZAK STERIEL CH14	20 st.	1 x 20 st.
665040	UNOMEDICAL HANDY-VAC MET DRAIN EN OPVANGZAK STERIEL CH18	20 st.	1 x 20 st.



Mini laag vacuüm wonddrainage systemen

Toepassing

Postoperatief afvoeren van wondvocht om infecties te voorkomen en het genezingsproces te bevorderen. Wonddrainage vindt plaats door laag vacuüm waardoor minder kans bestaat op weefselbeschadiging. De bijgeleverde speciale Ulmer drain zorgt voor een 2,5 keer betere drainage door de verkleinde kans op verstoppingen van de drain.

Het mini vacuum systeem wordt gebruikt na operaties aan hoofd, nek of hand.

Productinformatie

- 30 ml balg geeft een vacuum van 80 mmHg
- opnieuw vacuum instellen is mogelijk
- observatie van het secreet door de semi-transparante balg
- direct bruikbaar met bijgesloten trocar en drain
- trocar is gemaakt van chirurgisch staal
- tevens te verkrijgen in CH 08

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
662509	UNOMEDICAL MINI LAAG VACUÛM SYSTEEM MET TROCAR EN REDONDRAIN STERIEL CH6	50 st.	4 x 50 st.